



使用说明书

恒温培养 2D 摇摆摇床,ISRK04HDG
恒温培养 3D 波动摇床,ISWV02HDG



目录

1. 了解您的恒温培养摇摆/波动摇床	2
1.1 简介	2
1.2 用途	2
2. 安全信息	2
2.1 警告文字与标志的定义	2
3. 安装	3
3.1 开箱并检查标准配置	3
3.2 安放位置的选择	3
3.3 电源连接	3
4. 操作	4
4.1 控制面板	4
4.2 操作说明	4
5. 维护与养护	6
5.1 内部元件清洁	6
5.2 服务信息	6
5.3 故障排除	7
6. 技术参数	7
6.1 周围环境条件	7
6.2 技术规格	8
7. 安规信息	8

1. 了解您的恒温培养摇摆/波动摇床

本章将让您对恒温培养摇摆/波动摇床有必要的认识。即使您以前使用过奥豪斯的恒温培养摇摆/波动摇床，仍请仔细阅读本章并熟悉安全注意事项。

1.1 简介

感谢您购买了奥豪斯公司的恒温培养摇摆/波动摇床。奥豪斯公司是领先的实验室设备、理化分析仪器、天平、水分测定仪、衡器及电子称重仪表的生产商。我们的售后服务部门有专业的技术人员将尽快向您提供服务。同时，客户服务部会满足您对应用和配件方面的任何要求。

为确保您能完全掌握恒温培养摇摆/波动摇床的使用，请在安装和使用前仔细阅读该手册。

1.2 用途

恒温培养摇摆/波动摇床用于一般实验室使用。若在设计要求之外使用不能保证其安全性。

2. 安全信息

2.1 警告文字与标志的定义

安全提示信息由警告文字和警告标志组成。忽视安全提示信息可能导致人身伤害、设备损坏、设备失灵或测试结果错误。

警告文字



警告! 禁止在危险环境下或与危险材料一起使用恒温培养摇摆/波动摇床。同样，如果设备与非制造商提供或推荐的附件一同使用，或是以非制造商指定的使用方式使用，设备可能受损。

在水平的台面上使用设备，可获得最佳性能，也最安全。



注意! 从设备上断开电源线或断开地接电源来完全断电，从而避免电击。对设备进行维护和服务前，断开电源。

在设备冷却后，应及时清除溢出物。请勿将本机浸泡以进行清洁。如果显示电气或机械损坏的迹象，请勿操作本机。

本产品提供的主电源电缆可在规定的环境条件下安全处理产品的电气负载。不要使用额定值不足的主电源线更换电源线。

恒温培养摇摆/波动摇床设计用于在干燥条件下操作。不要将水，油或其他液体放在设备的空腔中。带加热模块金属浴和浴池不是设计成填充有液体或其它流体。请勿在该空腔中放置非适当的加热块。



注意! 恒温培养摇摆/波动摇床不防爆。当设备开启或加热挥发性物质时请小心。



接地——保护导体终端



交流电

3. 安装

本章，您将学习如何开箱安装恒温培养摇摆/波动摇床，并做好使用前的准备。根据本章描述的步骤进行安装后，即可使用本仪器。

3.1 开箱并检查标准配置

开箱，取出仪器和配件。检查是否完整。

以下附件是恒温培养摇摆/波动摇床的标准配置：

- 恒温培养摇摆/波动摇床
- 电源线
- 使用说明书

收到奥豪斯恒温培养摇摆/波动摇床时，请检查确保设备在运输过程中没有损坏。如果在开箱过程中发现损坏，请立即通知承运商。

3.2 安放位置的选择

开箱后，请将恒温培养摇摆/波动摇床置于水平台面或桌子上，远离爆炸性气体。确保用于放置设备的台面可以承受设备产生的热量。并将设备放置在离垂直表面至少 15 厘米处。始终将本机放置在坚固的工作台面上。

3.3 电源连接



警告：电击危险

恒温培养摇摆/波动摇床随附一根电源线，首先插入设备背面的 IEC 连接器，然后将其插入正确接地的插座。230V 设备插入 230 V，50 / 60Hz 电源。

4. 操作

4.1 控制面板

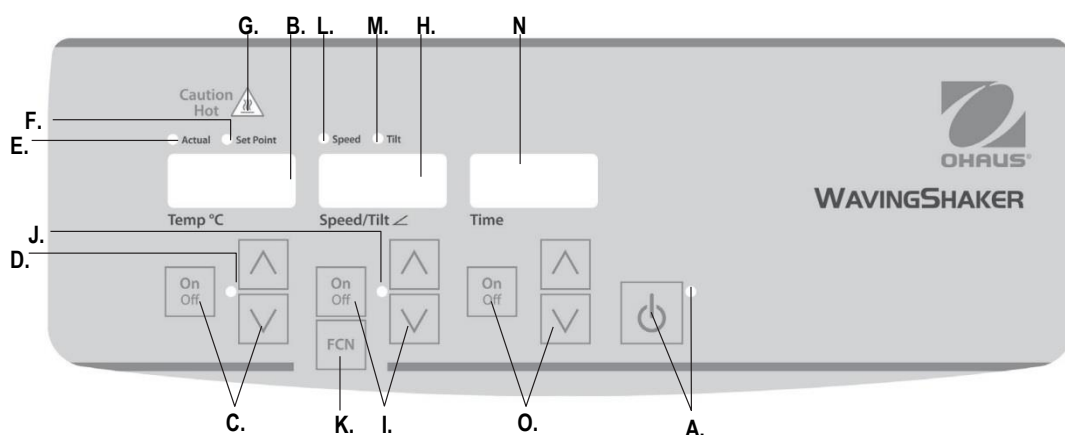


图 4-1

摇摆/波动恒温培养摇床的前置面板包括操作设备所需的所有控制键和显示。

- A. **待机键/待机提示灯**：当设备通电时，待机提示灯将闪烁。设备进入待机模式。按待
 - a) 机键启动温度、转速/倾角和时间功能。待机提示灯将关闭，温度、转速/倾角显示和时
 - b) 间显示闪烁。再次按待机键，设备会重新回到待机模式。
- B. **温度显示**：显示实际/设定的温度以及实际/设定的提示灯
- C. **上/下键**：用于设定值控制。
 - a) **On/Off 键**：用于开启/关闭加热功能。
- D. **加热提示灯**：当设备加热时，加热提示灯会闪烁。
- E. **实际提示灯**：当显示的温度为加热腔内实际空气温度时，提示灯闪烁。
- F. **设定值提示灯**：当显示设定的温度时，提示灯闪烁。
- G. **当心烫伤提示灯**：当加热腔的空气温度高于 40°C (104°F) 时，提示灯闪烁。
- H. **转速/倾角显示**：显示设备的转速和倾角。
- I. **上/下键**：用于设定值控制。**On/Off 键**：用于开启/关闭摇摆/波动功能。
- J. **转速/倾角提示灯**：设备摇摆/波动时，转速/倾角提示灯将闪烁。
- K. **功能键**：按键选择需要设置的功能：转速或倾角。
- L. **转速提示灯**：当转速显示时闪烁。
- M. **倾角提示灯**：当倾角显示时闪烁。
- N. **时间显示**：显示累计时间（连续模式下）或剩余的时间（定时模式）。
 - a) **On/Off 键**：用于开启/关闭时间功能。显示界面提示分钟和秒钟直至定时器达 99 分钟和 59 秒（99:59），然后显示屏自动显示分钟直至 9,999 分钟。

4.2 操作说明

奥豪斯摇摆/波动培养摇床用于制备测试样品。这些设备的温度、转速/倾角和时间功能可以单独运行。可以在不重置定时器的情况下重置温度和转速/倾角，也可在不影响加热或摇摆/波动功能的情况下关闭和开启定时器。

1. 准备阶段：

- a. 将电源线接入合适的接地电源。待机提示灯闪烁，确认设备已供电。为设备供电前，手动将托盘移动到接近水平的“home”处。
- b. 按待机键，取消待机模式。待机提示灯关闭，温度、转速/倾角和时间显示闪烁，显示先前使用的设置。

2. 设置温度：

- a. 按温度显示下方的上/下键直至所需的温度。当松开按键后，显示屏闪灭，然后提示新设置的温度已设定。
- b. 按 On/Off 键开启加热功能。温度显示下方的提示灯闪烁，提示加热功能在使用中。五（5）声蜂鸣提示音提示已达设定温度。
- c. 使用温度显示下方的上/下键调整设定的温度，不会中断加热。调整好温度后，松开按键，显示闪烁，提示已设定新的温度。
- d. 按温度显示下方的 On/Off 键可停止加热，加热提示灯关闭。

当心烫伤提示灯：

当心烫伤提示灯警告加热腔内的空气温度已超过 40°C。当加热腔内的空气温度超过 40°C 时，提示灯闪烁并常亮。关闭加热后，当心烫伤提示灯会一直闪烁，直至加热腔内的温度低于 40°C。



3. 设置倾角：电子测倾可以帮助用户在设备摇摆/波动时或设备停止时调整托盘移动的角度。

- a. 按住转速/倾角显示下方的功能键直至倾角提示灯闪烁。现在您可以设置倾角。
- b. 按住转速/倾角显示下方的上/下键直至所需的倾角。当松开按键后，显示屏闪灭，然后提示新设置的倾角已设定。设备会以先前设定的倾角转一圈，然后慢慢转为新设置的倾角。倾角提示灯将闪烁直至完成新倾角的转换。

4. 设置转速：

- a. 按住转速/倾角显示下方的功能键直至转速提示灯闪烁。您现在可以设置转速。
- b. 按住转速/倾角显示下方的上/下键直至所需的转速。当松开按键后，屏幕会闪灭，然后提示新设置的转速已设定。
- c. 按住上/下键启动摇摆/波动功能。转速/倾角显示下方的提示灯闪烁直至达到设定值，然后提示灯一直闪烁，提示摇摆/波动功能正在使用中。
- d. 按转速/倾角显示下方的 On/Off 键，可关闭摇摆/波动功能。设备会转动一圈，然后停止在“home”的水平位置。转速提示灯会闪烁直至转完一圈。设备转完一圈后，设备会自动转变为待机模式，待机提示灯闪烁。

操作小贴士

当设备以低转速或高倾角运行时，对倾角或转速进行大的改动可能需要几分钟才能完成设置。欲快速完成大的改动，需关闭设备后再更改转速或倾角，然后按转速/倾角显示下方的 On/Off 键来重启设备。

5. 设定时间为零（0:00）和连续模式：累计时间

- a. 按时间显示下方的 On/Off 键。三（3）秒后显示屏提示先前设定的时间。
- b. 同时按住上和下键，显示屏提示零（0:00）。设备时间被设定为（0:00）分钟。您可使用上/下键来将时间设置为零（0:00）。
- c. 按时间显示下方的 On/Off 键。显示屏会提示累计时间。上/下键会被禁用。再次按 On/Off 键可关闭定时器。**重要：这不会中断摇摆/波动功能。按转速/倾角显示下方的 On/Off 键会中断摇摆/波动功能。**
- d. 长按时间显示下方的 On/Off 键，进行重置。三（3）秒后显示屏提示先前设置的时间，也就是零（0:00）。

6. **设置定时模式：**设定的时间。
 - a. 按时间显示下方的上/下键直至所需的时间。
 - b. 按时间显示下方的 On/Off 键，启动定时功能。设备以设定的时间运行。当定时器运行时，上/下键会被禁用。当显示为零（0:00）时，设备会停止摇摆/波动。四（4）声蜂鸣提示音提示已完成倒计时。时间显示会默认回到设定时间。重复相同的计时，仅需再次按 On/Off 键。
 - c. 按时间显示下的 On/Off 键，可在计时完成前中断自动计时。时间显示闪烁，提示时间功能为“挂起”。**重要：**这不会中断摇摆/波动功能。按转速/倾角显示下方的 On/Off 键会影响中断摇摆/波动功能。按时间显示下方的 On/Off 键，重置定时器。设备会继续倒计时至零（0:00）。当显示为零（0:00），会有四（4）声蜂鸣提示音提示倒计时已完成并且摇摆/波动结束。
7. **关闭设备：**
 - a. 按待机键，关闭设备。温度、转速/倾角和时间显示为空白，待机提示灯闪烁。不使用时，摇摆/波动培养摇床将保持待机模式。从设备拔出电源线或断开地接电源，设备将完全断电。

操作小贴士

内置存储可在断电期间保存最近一次使用的温度、转速/倾角和时间设置。在托盘摇摆/拨动受阻时，或设备过载时，设备的内置程序可切断发动机的电源。

5. 维护与养护

恒温培养摇摆/波动摇床将提供长期、无故障、可靠的服务。用户无需进行润滑或其他技术维护。用户无需维护保持表面清洁。对该设备进行电子设备的常规维护。注意防潮或避免暴露在烟尘环境下。

5.1 内部元件清洁

及时清理漏液。禁止使用清洁剂或溶剂清洗前置面板，清洁剂或溶剂将磨蚀或损坏塑料，也不要使用易燃物。清洁前，请确保设备电源已断开。

5.2 服务信息

如果故障诊断章节不能解决或没有描述到您的问题，请与授权的奥豪斯服务商联系。有关国内的服务援助，请拨打奥豪斯公司的免费售后服务热线800-217-188。奥豪斯产品服务专业人员将为您提供帮助。

5.3 故障排除

在设备运行期间，任何咔嗒声或嘀嗒声可能意味着托盘、托盘附件或配件上有螺丝松动。设备运行前，所有附件都应足够紧固。

问题	原因	解决方法
E1	培养摇床的 RTD 打开或温度超过 100°C (212°F)	该错误无法由用户修复。断开设备电源并联系您的奥豪斯代表处进行维修处理。
E2	培养摇床的 RTD 短路或温度低于 0°C (32°F)	该错误无法由用户修复。断开设备电源并联系您的奥豪斯代表处进行维修处理。
E3	机构卡死 马达停止 传动带损坏	按待机键以消除错误。如果 E30 错误码依旧存在并伴有研磨、敲打或摩擦噪音，应将设备断电并联系您的奥豪斯代表处来进行维修处理。当误发送 E03 错误命令时，如在设备运行时有人无意中碰到了托盘，设备会自动回到“home”水平位置并重启。若托盘下有异物，这会使设备一直重启，此时，设备会尝试自动回到 home 并重启四（4）次，然后停止运行，显示 E03 错误码。用户可通过按待机键来消除错误
E4	超载	按待机键来消除错误。重启设备时，请确保加载量在最大加载范围内。如果 E04 错误码依旧存在，应将设备断电并您的奥豪斯代表处来进行维修服务。

6. 技术参数

6.1 周围环境条件

操作条件：仅室内使用。

温度：5 ~ 40°C

湿度：最大相对湿度80%,无冷凝

海拔高度：2000 米

主电源：波动不超过额定电压的10%

无操作存放条件：

温度：-20 至 65°C

湿度：最大相对湿度80%, 无冷凝

安装类别II，污染等级2，符合IEC 664的规定。

6.2 技术规格

表 (6-1)





型号	恒温培养 2D 摇摆摇床 ISRK04HDG	恒温培养 3D 波动摇床 ISWV02HDG
整体尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.2 x 27.9 x 26.7cm	43.2 x 27.9 x 26.7cm
托盘尺寸 (长 x 宽):	25.4 x 19.1cm	23.5 x 18.4cm
电源	1.87A, 420W	1.87A, 420W
保险丝	5mm x 20mm, 5 安培快速熔断	
温度范围	室温 +5° 至 65°C	
温度一致性	37°C 时 ±0.5°C	
速度范围	1 至 50rpm*	1 至 30rpm*
转速精度	±1rpm	±1rpm
倾角	0 至 15°*	0 至 20°
定时器	1 秒至 160 小时	1 秒至 160 小时
圆周直径	3mm	3mm
最大载重量	4.5 kg **	2.3 kg **
控制器	详见 4.1 章节	详见 4.1 章节
托盘材质	铝	铝
运输重量	10 kg	10 kg

*加载重物或加载不稳定时，最高转速/倾角可能不同。

**置于托盘中心。

7. 安规信息

该产品符合以下安规。

标志	安规
	奥豪斯声明恒温培养系列摇床遵守 2011/63/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU 指令和 EN IEC 63000、EN 61010-1、EN 61010-2-010、EN 61010-2-051、EN 61326-1 标准。欧盟合规性声明可见 www.ohaus.com/ce 。
	本产品符合 2012/19/EU 条令。请按照当地法规在规定的电子电气收集点处理本产品。 关于欧洲的报废处理要求，请查阅 www.ohaus.com/weee 。
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-2-010, CAN/CSA C22.2 61010-2-051 UL 61010-1, UL 61010-2-010, UL 61010-2-051

本产品符合中国的 GB 4793.1、GB4793.3、GB 4793.6、GB/T 18268.1 的相关要求。

全球说明

警告：本产品为 A 类产品。在室内环境下，本产品可能产生无线电干扰，用户需要采取必要的措施。

FCC 说明

本设备已经按照 FCC 规则第 15 部分的规定进行了测试，符合 A 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的防护，防止设备在商业环境运行时产生有害干扰。本产品会产生、使用和辐

射射频能量。如果不按照使用说明书安装和使用，可能对无线电通信造成有害干扰。在住宅区使用该设备可能造成有害干扰，在这种情况下，使用者需自行承担费用消除此干扰。请注意，未经合规责任方明确批准的变更或修改有可能导致用户无权操作此设备。

加拿大工业协会说明

该 A 类数字设备符合加拿大 ICES-003 的所有要求。

ISO 9001 认证

管理该产品生产的管理体系经 ISO 9001 认证。

电子电气产品有害物质或元素的名称及含量标识

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电路板/器件	×	○	○	○	○	○
电子线	×	○	○	○	○	○
试管架组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



奥豪斯国际贸易（上海）有限公司

保 修 卡

维修服务热线电话 **0519-85287270*3444**
0519-85287270*3454
售后服务邮箱 **ohauservice@ohaus.com**

注意事项：保修卡是设备的保修凭证，请在设备开箱使用后即将保修卡填妥寄回本公司备案，或到奥豪斯网站 www.ohaus.com 注册您的产品。如未事先返回保修卡或未在奥豪斯网站注册，可能会影响您的设备的保修。

用户名称：_____

地 址：_____

联系人_____电话_____邮政编码_____

购买日期_____型号_____机号 SNR_____

发票号码_____

- 请用户务必正确填写，以备登记，便于维修服务。
- 本公司及维修站将凭该卡记录和发票对您所购产品进行保修。

奥豪斯国际贸易（上海）有限公司
邮寄地址：常州市河海西路 538 号 22 号楼厂房二层
邮政编码：213125
电 话：0519-85287270*3444
0519-85287270*3454

维修单位：
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：



外商投资

制造/服务：奥豪斯仪器（常州）有限公司
地址：江苏省常州市河海西路 538 号 22 号楼
邮编：213125
服务热线：0519-85287270*3444/3454
销售：奥豪斯国际贸易（上海）有限公司
地址：上海市桂平路 680 号 33 幢 7 楼
邮编：200233
营销热线：4008-217-188

如有技术变更，恕不另行通知
欢迎访问公司网站注册产品信息
<http://www.ohaus.com>
E-mail: ohauservice@ohaus.com



SAP P/N 30391275F P/N: 715316-00 © 2021 奥豪斯公司版权所有



奥豪斯官方微信