

IKA








designed for scientists

EUROSTAR 60 control EUROSTAR 100 control 顶置式搅拌器



使用说明

ZH

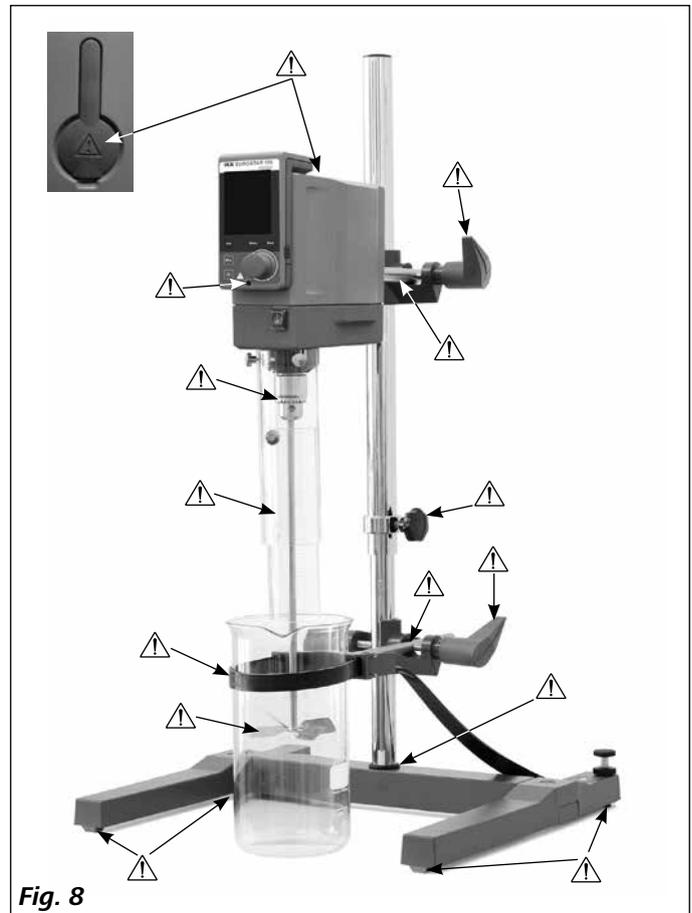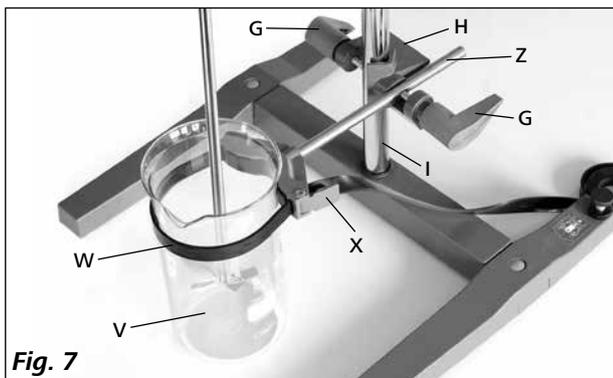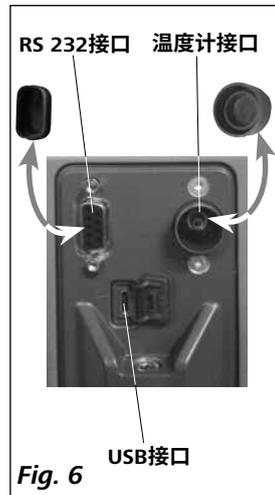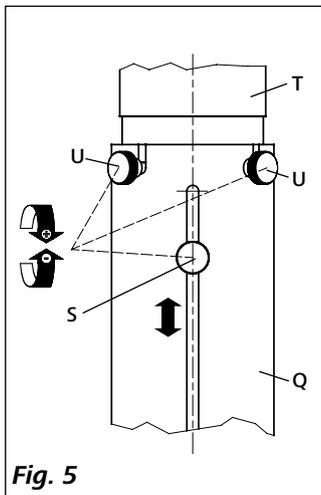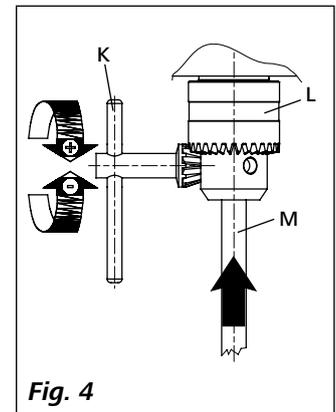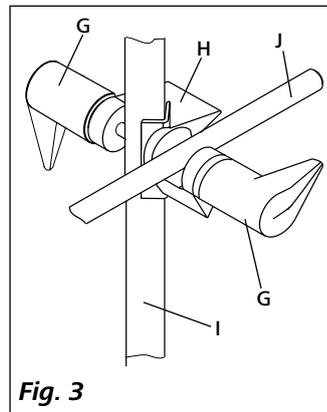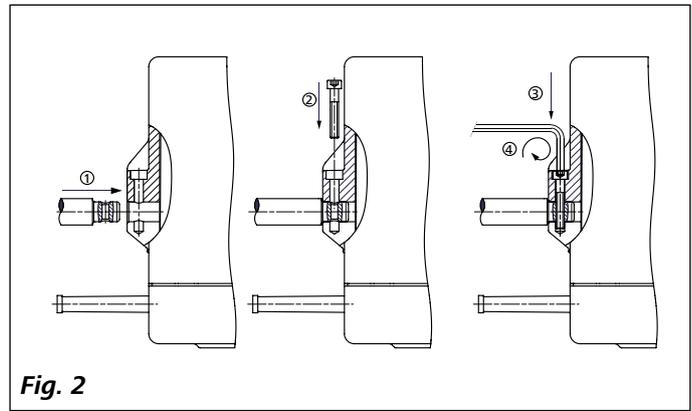

目录

	页码		页码
符号说明	3	安装	7
安全说明	3	开机	8
正确使用	5	实用信息	8
开箱	5	无线控制器	8
驱动	6	接口和输出	16
马达保护	6	清洁维护	17
转速——正常操作	6	错误代码	18
转速——过载操作	6	保修	18
输出轴	6	选配件	18
转速显示	6	IKA® 可选搅拌桨	18
调试	6	技术参数	19

符号说明




一般危险



该符号所标识的信息**对于操作者的健康和安全至关重要**。违反该符号标识的操作将有可能对您的健康或人身安全造成危害。



该符号所标识的信息**对于保证仪器正常工作非常重要**。违反该符号标识的操作将有可能导致仪器损坏。

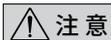

该符号所标识的信息**对于确保仪器的有效工作和使用非常重要**。违反该符号标识的操作将有可能导致所处理的结果不准确。

安全说明

• **操作仪器前请认真阅读本使用说明并遵守安全操作规范。**

- 请将本使用说明放置于使用者方便查阅的地方。
- 确保只有受过相关训练的人员才能操作本仪器。
- 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
- 由于不同的实验中可能选择使用各种仪器、搅拌桨、搅拌容器以及不同的介质；我们无法仅仅通过产品的安全设计保证使用者的安全；例如：玻璃器皿或其他搅拌容器可能由于机械应力的作用而破碎；可能因其放置不稳而打碎；也可能因加速过快或者搅拌桨和搅拌容器间隙过小导致其破碎。破碎的玻璃容器或者转动的搅拌桨都有可能伤害到使用者。因此，操作人员需要采取其他的安全防护措施。
- 被加热的介质由于搅拌不均匀或者因转速设置过高而引起的外部能量的输入都可能导致不可控的反应；这些危险性增大的情况下，操作人员必须额外采取适当的安全防护措施，例如：防破碎保护装备。无论如何，在处理危险的或者有害的物料时，**IKA®** 建议额外采取一些合适的措施确保实验的安全性，例如操作人员可以使用一些防火、防爆的措施或者全面的监控设备。此外，操作人员必须确保仪器的电源关闭开关随时都可以毫无障碍和危险的关闭。



如果仪器的安装或放置场所无法确保电源关闭开关可被随时关闭，必须在工作区域安装操作便利的**紧急关闭**开关。

- 本仪器仅适用于对处理过程中产生的能量不发生危险反应的介质；同时被处理的物质也不能与其他方式产生的能量反应，如光照。
- 请勿在易爆的环境或水下操作使用本仪器，请勿使用本仪器处理危险的介质。
- 处理病原体介质时，请使用密闭容器并在合适的通风橱中进行。如有其他问题，请联系**IKA®**应用人员。
- 本仪器不适合手持操作。
- 由于本仪器所输出力矩较高，需特别注意选择和使用支架、夹头以及防止搅拌容器转动的容器固定夹。
- 将仪器支架放置于宽敞、平坦、平稳、清洁、防滑、干燥、防火的台面。
- 确保搅拌桨被正确、牢固地安装于钻夹头中！
- 请使用搅拌桨防护罩！
- 搅拌容器必须固定，另外请注意整个装置的稳定性。

⚠ 危险

注意Fig. 8中所示的危险部位。

- 确保仪器和配件免受挤压和碰撞。
- 使用前请检查仪器和配件并确保无损，请勿使用损毁的仪器和配件。
- 只有使用“**选配件**”列表中的配件才可确保安全操作。
- 更换搅拌桨时，必须断开电源以关闭仪器。因为其他人员可以通过无线控制器(WiCo)开启仪器。
- 只有拔下仪器电源插头才能完全切断电源。
- 电源插座必须易于操作。
- 电源插座必须接地保护。
- 输入电压必须与仪器铭牌上标示的电压一致。
- 请遵守搅拌桨允许的转速范围，请勿设置过高的转速。
- 仪器调试前，确保调速旋钮被置于最低转速位置，否则仪器将以上次所设定的转速运转。提高转速时需逐渐升高转速。
- 设置转速时，请注意避免搅拌桨转动不平稳以及可能出现的介质溅出。

⚠ 危险

请勿空载操作转动中的仪器。确保身体各个部位、头发、首饰或衣物不可被转动部件勾住或缠绕。

⚠ 危险

自由旋转的搅拌杆顶端会产生危险；因此，出于安全的考虑，只有静止时仪器搅拌杆才能伸出仪器上壳。

⚠ 危险

根据所处理的介质种类，在操作仪器时请佩戴合适的防护装备；注意以下可能出现的危险：

- 液体溅出，
- 部件飞出，
- 身体、头发、衣物被勾住。

⚠ 危险

请注意下列危险：

- 易燃介质，
- 由于机械震荡导致的玻璃容器的破碎。

⚠ 危险

出现以下状况时，请降低转速：

- 由于转速过高导致液体溅出，
- 仪器转动不平稳，
- 由于动力导致仪器开始移动，
- 仪器出现故障。

⚠ 危险

操作中请勿触摸转动的部件！

- 搅拌输出轴和介质间可能存在的静电可产生直接的危险。
- 搅拌过程中出现电源中断或者机械中断后仪器不会自动重启。
- 请注意操作中马达表面(散热片)和某些部件的轴承部分可能处于高温状态。

- 请勿堵塞仪器或马达上的通风槽以及马达散热片。
- 请勿撞击搅拌桨的底端部位以及钻夹头棘齿，即便是轻微的损坏都可能导致搅拌桨输出轴的不平稳。
- 确保支架不会因仪器搅拌而移动。
- 输出轴和钻夹头尤其是搅拌桨的不平衡可导致仪器和整个装置共振从而导致玻璃器具和搅拌容器的破碎。这有可能对操作者造成伤害，也可能损坏搅拌桨。该情况下，请更换搅拌桨以矫正所出现的不平衡。如果更换搅拌桨后问题没有改善，请附问题说明将仪器发送至您的供应商或厂家检视。
- 如果仪器长时间过载操作或者周边温度过高，仪器会自动关闭。
- 即使在维修时，也只有经过专门培训的专业人员才能打开仪器。打开仪器前，请拔下电源。仪器拔下电源后内部某些带电部件可能仍处于带电状态。

⚠ 警告

为确保安全操作，塞盖或者其他可从仪器上移走的零部件(选配件除外)须重新安装到位。这可防止例如液体、外部物体等进入仪器。

⚠ 注意

操作中，如果电池**RB 1**(可充电)完全放电，仪器将继续运转或者停止运转，这将取决于超时和安全转速的设定值。如果无线控制器电池完全放电时仪器继续运转，只有通过主机上的**安全停止开关 (safe STOP)** 以及电源关闭按键关闭仪器。

⚠ 危险

关于电池RB 1(可充电)注意以下安全说明：

- 请将电池放置于小孩接触不到的地方。
- 请将电池于干燥、低温环境下存放。
- 切勿将电池投掷于火中；避免阳光直射以及 60 °C 以上的温度。高温会导致电池损坏并使其不稳定，100 °C 以上温度可能导致电池爆炸。
- 切勿将电池投掷于水中或暴露在潮湿的空气中。水分会导致电池短路并使电池爆炸。
- 请勿私自改装、挤压或者其他方式的破坏电池，否则可能导致电池中的液体渗漏或者电池爆炸。
- 长时间不用时，避免将电池与曲别针、硬币、钥匙、钉子、螺丝或其他小型金属物体共同放置；金属可使电池触头桥接短路，从而导致电池爆炸。
- 电池爆炸可能会释放出电池中液体并引起火灾。
- 该锂聚合物电池只可在**IKA**®产品中使用和充电。
- 电池应轻松滑入电池仓，不可强力推入。
- 长时间保存电池时，请将电池存放于密封的塑料袋中以防止由于潮湿或者接触金属部件而短路。
- 电池使用温度范围为 0 °C 至 +45 °C。请注意在 20 °C 以下温度时，电池容量会下降。
- 只有技术参数中推荐的可充电电池可用于本仪器！



请勿对已经渗漏、变色、变形或者其他方式破损的电池进行充电。

弃置说明:

- 丢弃IKA®电池时,请用胶带将电池触头粘住以防由于潮湿或者接触金属而短路从而发生爆炸。
- 请勿将电池丢弃于家庭废弃物中,请根据当地规定妥善处理废弃电池。

 终端用户应遵守当地法令送返废弃电池,禁止将电池丢弃于家庭废弃物中。标识有本符号的废弃电池/可充电电池中含有有害物质,不可作为家庭废弃物处置。

- 请根据当地法令协助保护环境,将用过的废弃电池和可充电电池免费送返当地授权的收集站或电池零售处。
- 废弃电池的处理必须遵守当地和国家的法规。

正确使用

• 应用:

通过配置不同的搅拌桨可用于混合/搅拌低粘度到高粘度的液体介质。

设计用途:固定于支架(钻夹头朝下)。

• 使用区域(仅可用于室内):

- 实验室
- 学校
- 制药
- 大学

• 无线远程控制:

通过无线通信连接无线控制器和仪器前,首先请检查所在区域是否被无线信号所覆盖,如果所在区域没有无线信号,请使用 USB 数据线进行远程控制。

仪器可用于下列之外的所有区域:

- 居民区;
- 直接连接于低压供电网络同时提供居民供电区。

出现下列情况时我们将无法确保使用者的安全:

- 如果使用了非厂家提供或推荐的选配件;
- 如果仪器操作有误或者违反了厂家的操作规范;
- 如果仪器或者电路板被第三方非法修改。

开箱

• 开箱:

- 请小心拆除包装并检查仪器;
- 如果发现任何破损,请填写破损报告并立即通知货运公司。

• 交货清单:

- EUROSTAR 60 control或EUROSTAR 100 control顶置式搅拌器(带无线控制器)
- 使用说明
- 支臂
- 内六角螺钉
- 内六角螺钉拆卸螺丝刀
- 钻夹头扳手
- 保护盖
- 保修卡
- OS 1.0 电源装置
- USB 数据线(micro A – micro B 2.0)
- USB 数据线(A – micro B 2.0).

OS 1.0电源装置(用于无线控制器):



适配器
欧洲、瑞士



适配器
英国



适配器
美国、中国



适配器
澳大利亚



驱动

旋转无线控制器上的旋钮(B, 见 Fig. 1) 可在搅拌器整个转速范围内进行调速。

马达保护

仪器适于连续运转, 仪器马达采用电子限流保护装置。仪器配有防失速和防过载装置。

当出现故障时, 安全回路通过继电装置立即关闭马达; 当仪器的安全运转受到危害时故障提示出现。

转速——正常操作

转速——控制 (速度无变异):

仪器转速由处理器系统监控和控制, 设定转速时刻与实际输出轴转速对比并时刻校正变异, 保证了在处理的介质粘度发生变化时转速也能保持恒定。

电源电压在允许范围内的波动不会影响处理的质量和速度的稳定。通过无线控制器前面的旋钮(B, 见 Fig. 1) 对转速进行设置。正常操作时, 转速数值以转/分(rpm)形式显示在无线控制器的屏幕(C, 见 Fig. 1)上。

转速——过载操作

为了克服负载的峰值, 例如固体或半流体介质加入时, 搅拌器可以在短时间内输出双倍额定功率。当仪器过载运转时(例如在搅拌过程的某个特殊阶段粘度变大), 马达转速会降低到一定范围从而使搅拌输出轴实际扭矩保持在仪器的额定扭矩范围内。

搅拌器运转过程中, 根据操作条件转速不断调整直至与设定转速尽可能接近。

过载状态 1:

仪器在过载状态运转, 实际转速与设定转速不一致。这种状态会一直持续到马达电流或者温度超过所允许的数值。

此时, 扭矩数值在屏幕上闪烁。

一旦负载再次降低到正常的范围内, 扭矩值停止闪烁。

过载状态 2:

如果负载的波动导致仪器输出的扭矩超过两倍正常值, 搅拌输出轴的转速迅速降至零。

屏幕显示: 错误代码 4 (见“错误代码”部分)。

输出轴

钻夹头和输出轴可匹配使用 IKA® 所推荐的搅拌桨(见“可选 IKA® 搅拌桨”部分)。输出轴为中空设计, 仪器外壳顶部圆孔开口处有盖子盖住。当仪器处于**静止状态**时, 盖子打开后, 搅拌杆可以伸出仪器外壳的上方, 例如更换搅拌容器时。

为安全起见, 搅拌器的孔盖必须安装回原位以保持密封; 这可以确保仪器的安全操作并防止介质进入仪器。



危险

请参考“安全说明”部分!

转速显示


通过无线控制器前面的旋钮(B, 见 Fig. 1)调整转速。

转速以转/分(rpm)形式显示在无线控制器的屏幕上。

调试

将顶置式搅拌器及所需的选配件安装于稳固、平整、防滑的工作台面上。顶置式搅拌器必须使用夹头(如 R 270)固定于一个稳定的支架台(R 2722 或 R 2723)上。为安全起见, 搅拌容器必须加以固定。

确保支架台在搅拌过程中不会移动和倾倒。按照如下说明安装配件(Fig. 2 至 Fig. 7)。

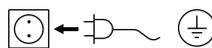

如果满足了上述条件, 接通电源后仪器即可开始运行。

将支臂固定于顶置式搅拌器

请参考 Fig. 2

请确保支臂安装牢固。

振动可能导致螺丝松动, 因此, 使用时请经常检查支臂是否牢固, 如有必要, 请拧紧固定螺丝。

将搅拌器固定于支架

请参考 Fig. 3

首先将夹头(H)固定于支架(I)上, 然后将搅拌器支臂(J)固定于夹头上开口向上的凹口。确定好搅拌所需的位置后, 拧紧夹头的两个螺栓(G)。

使用前, 请检查搅拌器是否牢固的固定在所需的位置, 并周期性的检查。只有当搅拌器停止运转, 电源断开时才可以调整搅拌器位置。

使用转夹头固定搅拌桨

请参考 Fig. 4

将搅拌桨(M)插入钻夹头(L), 使用钻夹头扳手(K)拧紧钻夹头。只有在仪器停止运转并断开电源时才可以更换搅拌桨。

安装搅拌桨防护罩

请参考 Fig. 5

使用仪器时, 请使用搅拌桨防护罩(Q), 例如 R 301; 防止来自搅拌桨的伤害。

如 Fig. 5 所示, 使用螺丝(U)将塑料防护罩固定于搅拌器(T)。螺丝(S)可以调节搅拌桨防护罩的长度。

在使用前, 请检查搅拌杆防护罩是否牢固的固定在所需的位置, 并周期性的检查。只有当搅拌器停止运转, 电源断开时才可以调整搅拌杆防护罩的位置。

固定搅拌容器和支架

请参考 Fig. 7

首先将夹头(H)固定于支架(I)上。

然后根据搅拌器和搅拌容器的位置将容器固定夹的支臂(Z)固定于夹头朝上的开口处; 拧紧夹头的两个螺栓(G)。

使用容器固定夹上的绑带(W)将搅拌容器(V)固定, 通过扣紧手柄(X)将柔性绑带(W)固定紧。

将无线控制器固定于搅拌器

请参考 Fig. 1

将无线控制器安装于主机上的充电触头并用螺丝(P)上将其固定。

连接温度传感器 USB 以及 RS 232 信号线

请参考 Fig. 6

如 Fig. 6 所示, 将接口处的保护帽移开后, 正确连接 USB, RS 232 或温度传感器。

当使用 USB 数据线将搅拌器 EUROSTAR 60 / 100 control 与电脑连接时, 仪器所需的驱动信息被传输至 Windows 操作系统, 然后 Windows 操作系统将进行下列某项操作:

- 安装驱动
- 如果驱动没有安装, 操作系统自动安装驱动
- 提示用户通过下列链接手动安装


点击 <http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip>

给电池 RB 1 (可充电) 充电

无线控制器中的电池组可通过下列方式充电:

- 通过 EUROSTAR 主机充电
- 通过 USB 数据线在电脑或主机充电
- 通过 OS 1.0 电源装置充电。

更换无线控制器中的电池块 RB 1

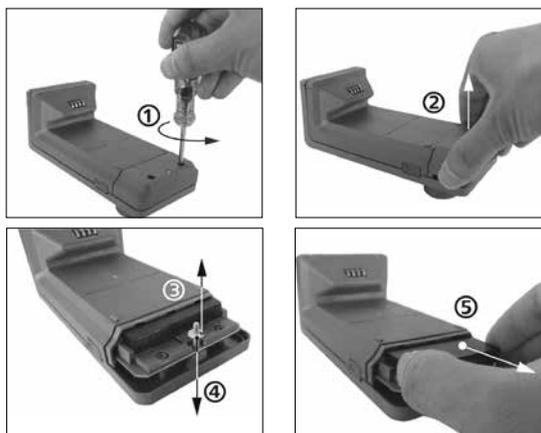

危险

请遵守“安全说明”中关于电池 RB 1 的相关安全规定!

开机

开机前请检查实际所使用的电源是否与仪器铭牌要求一致。



如果符合上述条件,插上电源即可开启仪器进行操作。

如果上述条件未能满足,将无法保证安全操作,有可能导致仪器损坏。

首次使用 **EUROSTAR** 搅拌器前请使用固定螺丝 (P, 见 Fig. 1) 将无线控制器固定于主机,从而可对电池 (RB1 电池) 进行充电。

打开仪器电源开关 (A, 见 Fig. 1) 后,无线控制器屏幕 (C, 见 Fig. 1) 显示仪器名称以及软件版本;声音提示几秒钟后,屏幕显示上次操作时的转速设置 (操作模式 B);工作屏幕出现后,仪器器准备就绪。

如果开启仪器时,无线控制器没有安装在主机上,主机上的绿色 LED 指示条 (G, 见 Fig. 1) 以及绿色的蓝牙 (Bluetooth®) LED 指示灯 (F, 见 Fig. 1) 将会亮起。确保转速设置适于试机,如有疑问,使用旋钮 (B, 见 Fig. 1) 将转速设置为最低转速。按下旋钮 (B, 见 Fig. 1) 仪器将开始运转。

仪器控制按键可通过按下按键 (L)  锁定,从而可以防止仪器运转过程中被无意更改设置(屏幕上出现符号 )。再次按下按键 (L)  按键被解锁(屏幕上符号  消失)。



警告

在紧急情况时,可通过主机前面的**安全关闭**开关(safe STOP) (I, 见 Fig. 1) 关闭仪器。此

时,绿色 LED 指示条颜色由绿色变为红色并不停闪烁。

无线控制器屏幕提示 **EUROSTAR** 搅拌器被强制关闭。关闭并重新打开电源开关可重新开启仪器。

如果无线控制器蓝牙功能开启,即使在无线控制器被关闭的情况下也可通过按下主机上的蓝牙搜索按键 (H)  搜索无线控制器;此时,仪器会发出“哔”的声音。

待机(静止)状态时,**EUROSTAR 100 control** 搅拌器的转动方向可通过按下反转(Rev)按键 (K) 来改变。

注意:转动方向也可在“间歇模式”菜单设置切换(见“工作屏幕符号解释”以及“菜单导航和菜单结构”部分,见 Fig. 9)。

实用信息

EUROSTAR 60/100 control 搅拌器通过无线控制器进行控制。当无线控制器放置于 **EUROSTAR** 主机上时,主机和无线控制器间通过触头 (E, Q; 见 Fig. 1) 进行数据传输;无线控制器屏幕上显示“Home”符号 。如果无线控制器通过 USB 数据线连接于主机,无线控制器屏幕出现  符号。如果无线控制器既没有放置于主机又没有通过 USB 数据线连接于主机,则无线控制器和主机间通过蓝牙进行数据交换。此时,屏幕出现蓝牙符号 。根据建筑物的结构,使用蓝牙通信,无线控制器可控制搅拌器最大距离可达 150 米。仪器运行时,无线控制器可安装于搅拌器主机上,也可以放置于易于用户接触的安全场所。

如果无线控制器被安装在 **EUROSTAR** 主机上时,可充电池通过

触头 (Q; 见 Fig. 1) 自动充电。可充电池也可以通过无线控制器上的 USB 接口进行充电(见“安装”部分“给电池 RB 1 (可充电池) 充电”)。




警告

如果仪器运行时出现振荡,无线控制器必须通过固定螺丝 (P, 见 Fig. 1) 固定于主机上或者

放置于远离主机的地方。

无线控制器

无线控制器控制按键:

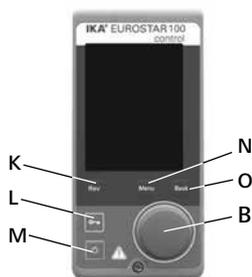

序号	名称	
M	开关按键:	打开和关闭无线控制器
L	锁定(Key)按键:	锁定/解锁按键和旋钮功能
N	菜单(Menu)按键:	按下该键:屏幕进入主菜单 再次按下该键:返回工作界面
B	旋/按钮:	导航、选择以及更改菜单中的设置
O	返回(Back)按键:	返回之前的菜单/重设扭矩
K	反转(Rev)按键:	反向转动 (仅适于 EUROSTAR 100 control) 注意: 只能在待机状态时切换仪器转动方向。


初始工作界面:



无线控制器打开数秒后, 出现开机屏幕, 屏幕显示仪器名称、软件版本。之后, 此工作屏幕出现。

注意: 只有当搅拌机主机开启才会出现蓝牙符号。

工作界面符号解释:

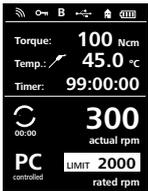

无线控制器屏幕所显示的符号取决于无线控制器的设置。

下列所示为工作界面显示的主要符号:

蓝牙 (Bluetooth®):

该符号说明 **EUROSTAR** 主机和无线控制器间通过蓝牙进行通信。

如果蓝牙通信终止, 符号消失。

锁定/解锁:

该符号说明控制无线控制器的按键和旋钮功能被锁定。当再次按下按键恢复控制功能后, 该符号消失。

B 操作模式:

该符号显示了当前所选择的操作模式 (A, B, C)。

USB:

该符号说明 **EUROSTAR** 主机通过 USB 信号线通信。

如果不再使用 USB 信号线与主机通信, 则符号消失。

Home:

该符号说明无线控制器和 **EUROSTAR** 主机通过充电触头直接通信。

当无线控制器从 **EUROSTAR** 主机上移走时, 符号消失。

电池 (可充电池):

该符号显示了无线控制器内部 **RB 1** 电池的充电状态。

当无线控制器通过下列方式给电池充电时, 充电符号出现:

- 通过 USB 数据线连接电脑时
- 通过 USB 数据线连接于 **EUROSTAR** 主机时
- 通过 USB 数据线连接于 **OS 1.0** 电源装置时
- 通过触头连接于 **EUROSTAR** 主机时

LIMIT 转速限制:

该符号显示了搅拌机最大转速限制, 仪器初始设置为搅拌器的最大转速。

温度传感器:

当温度显示选项被激活, 温度显示在屏幕时该符号出现。

PC 电脑控制:

该符号说明 **EUROSTAR** 主机或者无线控制器与电脑连接, 搅拌机通过电脑进行控制。

连续模式:

该符号说明搅拌机为连续运转模式以及搅拌器的运转方向。


间歇模式:

该符号说明搅拌机为间歇运转模式。

注意: 对于 **EUROSTAR 100 control**, 间歇模式中的当正反 (CW/CCW) 转功能被激活时符号  转动方向与搅拌器的转动方向同时改变 (见“间歇模式”部分)。

菜单导航及菜单结构:


菜单导航:

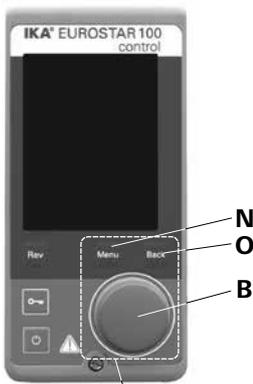

菜单导航控制

- ☞ 按下 "Menu" 按键 (N)。
- ☞ 向左或向右转动旋/按钮 (B) 选择所需的菜单或子菜单, 按下旋/按钮 (B) 确认选择。
- ☞ 再次按下或转动旋/按钮 (B) 选择所需的菜单选项并编辑数值或设置、或激活/取消激活某项功能。
- ☞ 转动旋/按钮 (B) 选择 "OK" 或者按下返回 (Back) 按键 (O) 或者菜单 (Menu) 按键 (N) 结束操作回到之前菜单或者工作屏幕。

注意: 被选中处于激活的菜单以黄色高亮显示。

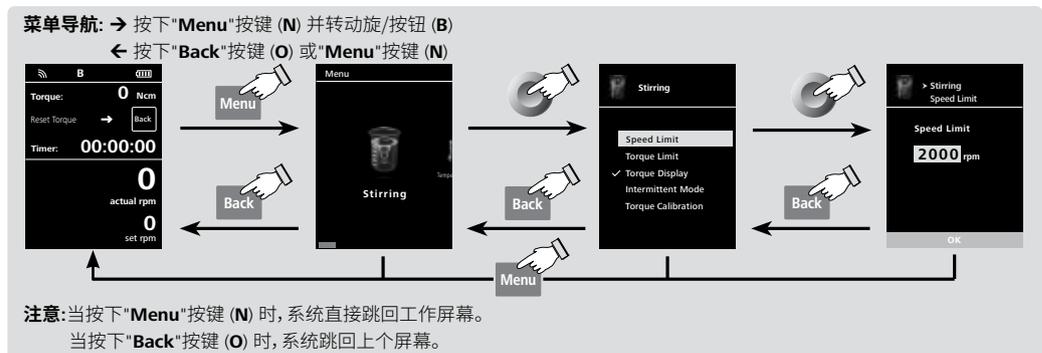

菜单结构:

Menu		出厂设置			
Menu	搅拌	转速限制	2000 rpm EUROSTAR 60 control		
		扭矩限制	1300 rpm EUROSTAR 100 control		
		扭矩显示	60 Ncm EUROSTAR 60 control		
		间歇模式	运转/停止	100 Ncm EUROSTAR 60 control	
			间歇	激活	-
				运转时间	-
	停止时间	00:00 [mm:ss]			
	扭矩校准	00:00 [mm:ss]			
	温度	探头温度	-		
		显示	-		
	计时器	设定	00:00:00 [hh:mm:ss]		
		显示	激活		
	操作模式	A	-		
		B	激活		
		C	-		
	显示	扭矩	激活		
		温度	-		
		定时	激活		
	程序	程序1	-		
...		-			
程序5		-			
安全	超时	00:30 [mm:ss]			
	安全转速	100 rpm			
	密码	000			
设置	Languages	English	激活		
		Deutsch	-		
		Français	-		
		Español	-		
		Italiano	-		
		日本語	-		
		中文	-		
		한국의	-		
		...	-		
		单位	°C	激活	
	°F	-			
	显示	背景	黑色	激活	
			白色	-	
亮度		标准模式	80%		
电池模式	20%				
声音	音量	10%			
	按键音	-			
出厂设置	-				
Bluetooth	激活				
信息	版本	是			
	Station 版本	是			
	操作模式	是			
	安全转速	是			
	最大转速	是			
	最大扭矩	是			
	间歇运行时间	是			
	间歇停止时间	是			
超时	是				
安全转速	是				

注意: ① 仅适于EUROSTAR 100 control!

菜单(详细):



搅拌:

转速限制:

在“**转速限制**”菜单中,用户可以给搅拌器设置所需的最大转速限定值。搅拌器的初始设置为其最大转速值,如果用户更改了该设置,无线控制器将保存新的设置用于以后的搅拌处理。如果“**转速限制**”被更改,则转速只能在新设定的限制范围内调整。

扭矩限制:

在“**扭矩限制**”菜单中,用户可以根据需要设置所需的最大输出扭矩限定值。搅拌器的初始设置为搅拌器的最大扭矩,如果用户更改了该设置,无线控制器将保存新的设置用于以后的搅拌处理。如果“**扭矩限制**”被更改,则搅拌器所输出的扭矩最大只能达到该扭矩限制数值。

注意:为满足搅拌中需要添加外物料的需求,扭矩限制可以过载约10秒钟。

扭矩显示:

在“**扭矩显示**”菜单中,用户可以将扭矩设置显示在屏幕上,对号(√)表示该选项被激活。

注意:搅拌器运转过程中,按下**Back**按键,则扭矩被设置为0 Ncm,之后Δ符号出现在扭矩数值前。

扭矩校准:

在此菜单中,用户可对扭矩进行校准,扭矩校准中所有轴承摩擦产生的扭矩都被排除在外。校准时需取下搅拌桨,该过程需要30秒,转速自动设置为50 rpm。

注意:只有使用 USB 数据线时才能进行扭矩校准;因此,扭矩校准时请将无线控制器从搅拌器主机上取下(参考“**接口和输出**”部分“**连接:无线控制器至EUROSTAR主机**”)。

间歇模式:








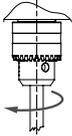
	符号转动方向	钻夹头转动方向	曲线图	
EUROSTAR 100 control EUROSTAR 60 control	 CW		 ∞ / CW...	出厂设置:连续模式
	 CW		 Run-Stop-Run / CW ...	运转/停止被激活: • 运转时间和停止时间可分别设置。
	 CW/CCW		 Run-Stop-Run (CW) / Run-Stop-Run (CCW) ...	运转/停止和顺时针/逆时针转(CW/CCW)功能被激活: • 运转时间和停止时间可分别设置。 注意: 顺时针和逆时针转动时间相同。
	 CW/CCW		 Run (CW) / Run (CCW) ...	顺时针/逆时针转(CW/CCW)功能被激活: • 顺时针和逆时针转动时间可分别设置。

Fig. 9

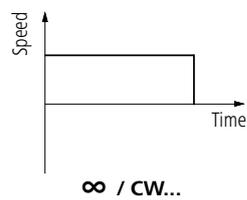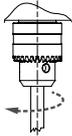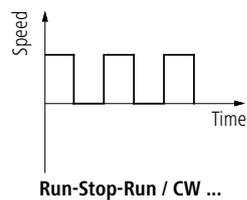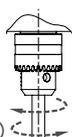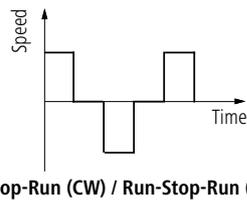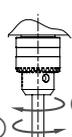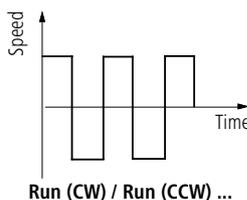

温度:

在“**温度**”菜单中,用户可进行设置,使温度显示在屏幕上;设置时,对号(✓)表示该项被激活。该设置的前提是温度传感器已经与**EUROSTAR**主机连接。如果温度传感器没有与搅拌机主机连接、出现故障或者温度高于 350°C 时,温度数值处出现三条短线(---)。

注意:请遵守“**技术参数**”中的外部温度传感器测量范围,所显示的温度可以是 °C 或 °F(见“**设置**”菜单)。



定时:

在“**定时**”菜单中,用户可进行设置,使定时显示在屏幕上;设置时,对号(✓)表示该项被激活。使用该设置,用户可使搅拌过程的实际时间显示在屏幕上。

用户也可以将某一时间设置为默认定时,这样用户就可将搅拌处理设置为一个标准的时间,当定时完成,仪器自动停止;所设定的搅拌时间显示在屏幕上。

注意:在定时尚未结束时,用户可以中止搅拌功能,此时计时器倒数计时被中断。



操作模式:

操作模式A:

该模式下,当前运转结束或者仪器被关闭后当前转速设置不会被保存。

操作模式B:

该模式下,当前运转结束或者仪器被关闭后当前转速设置会被保存,该数值可以更改。

操作模式C:

该模式下,当前运转结束或者仪器被关闭后当前转速设置会被保存,该数值不可以更改。



显示:

在“**显示**”菜单中,用户可以设定需要显示在工作屏幕中的信息。

注意:如果“**扭矩**”选项被激活,用户可通过按下“**Back**”按键将扭矩设置为0 Ncm作为参考值,Δ符号出现在扭矩数值前。



程序:

在“**程序**”菜单中,用户可定义5个转速-时间程序;另外用户可以在程序中自定义激活或取消间歇模式。

如果间歇模式被激活,“**间歇模式**”中运行和停止的时间数值将会被采用。

注意:如果用户需要激活程序中的间歇模式,需在菜单“**间歇**”选项中设置“**运行/停止时间**”,同时在“**间歇模式**”激活“**运行/停止**”功能(见“**搅拌功能**”)。

一旦程序被选定,以下选项生效:

开始:跟据需要开启选定的程序。

通过按下旋钮选择“**开始**”开启选定的程序,屏幕提示用户确认程序控制。按下旋钮选择“**OK**”确认程序控制。

编辑:编辑选定的程序参数。

按下旋钮选择“**编辑**”菜单选项开始编辑选定程序参数。用户可以在程序中编辑,删除或者插入一个程序段。

在程序中,用户至少定义一个程序段中的时间参数,则相应程序出现对号(✓)提示。

删除:删除选定的程序。

使用旋钮按下“**删除**”按键删除某个选定的程序,则程序中所有的参数被清空,对号(✓)消失。

程序编辑详述:

编辑程序时,出现如下屏幕:

程序 1	Seg No.	rpm	Time hh:mm	Interm. Mode
	1	0	00:00	No
	2			
	3			
	4			
	5			
	编辑 删除 插入			

该程序下,用户可定义最多5个程序段。选定的程序段呈高亮显示。之后用户可编辑、删除或者插入一个程序段。

程序编辑完成,按下“**Back**”按键,程序自动保存。

编辑:

当高亮状态的“编辑”符号出现在屏幕的右上方时,用户可以更改转速(rpm)、时间以及间歇模式的设置。

注意:转速(rpm)数值可以在仪器的转速许可范围内更改。时间可以在1分钟至10小时范围内设置。

删除:

删除一个高亮状态的程序段时,设置将被清空,高亮状态跳至下一个程序段。

插入:

在插入选项下,新的程序段可以在选定的程序段下插入,新的程序段的默认设置如下:

转速(rpm): 0

定时(Time) [hh:mm]: 00:01


间歇模式(Intermittent Mode): No

查看程序图表:


编辑程序后,按下"Back"按钮保存设置,再次按下此键,屏幕退回下面的屏幕:




5秒中内没有按下按钮或者旋钮,相关程序的图表出现在屏幕上。

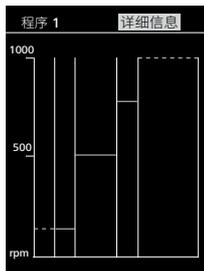


使用控制旋钮按下"详细信息",可以查看每个程序段的详细设置可以查看。

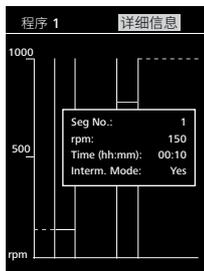

转动旋钮,可以切换查看不同程序段的详细信息。

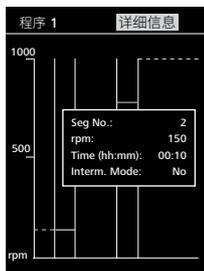

编辑程序示例:

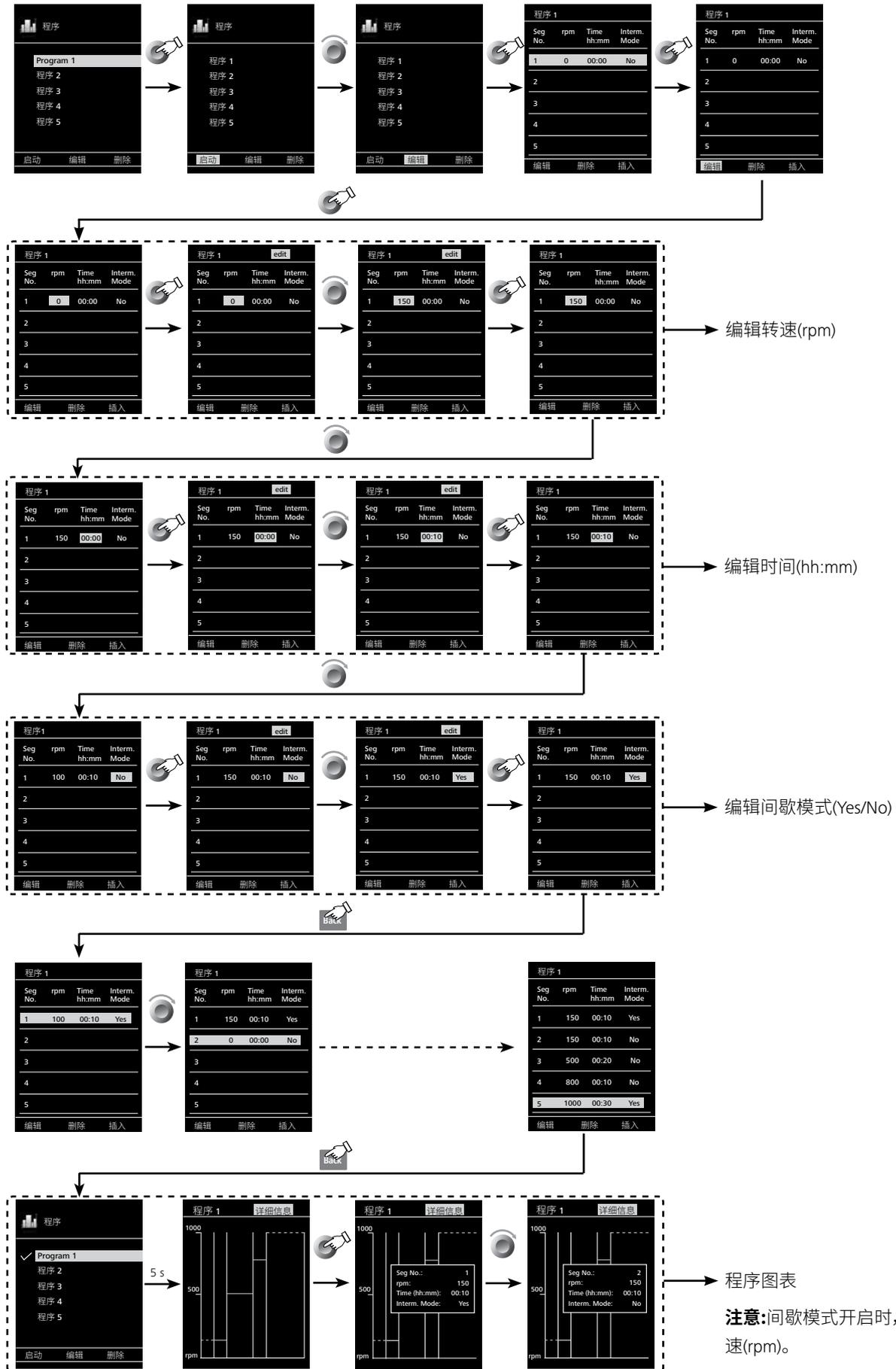



安全:

超时:

在“**超时**”菜单中,用户可以设定一个时间限制,该时间限制用于**EUROSTAR**主机和无线控制器间通信失效时或者通信距离超出范围的情况;**EUROSTAR**主机将会以所设置的转速继续运转直到所设定的时间结束。之后搅拌器将以所设置的安全转速运转(见“**安全转速**”部分)。

注意:超时初始设置为 30 秒,用户可设置的最大值为 60 分。



警告

如果间歇模式被激活,**EUROSTAR**主机将会立即切换至所设定的安全转速或者设定转速(设定转速小于安全转速时)。

安全转速:

在“**安全转速**”菜单中,用户可将适当的转速作为安全转速用于搅拌处理。安全转速用于**EUROSTAR**主机和无线控制器间通信中断或者通信距离超出范围的情况。

注意:安全转速初始设置为 100 rpm,在超时定时完成后将以安全转速运转(见“**超时**”部分)。

密码:

在“**密码**”菜单中,用户可设置一个密码来保护无线控制器中的设置(出厂设置为:000)。



设置:

语言(Languages):

通过旋转并按下旋钮 **(B)**,用户可在“**Languages**”菜单选项选择所需的操作语言。对号(✓)表示所选择的系统语言。

单位:

在“**单位**”菜单中,用户可选择屏幕显示所需的温度单位于。通过旋转并按下旋钮 **(B)**,用户可选择“°C”或者“°F”,对号(✓)表示所设定的系统单位。

屏幕:

在“**屏幕**”菜单选项,用户可以更改工作屏幕的背景颜色以及亮度。

声音:

在“**声音**”菜单选项,用户可以激活/取消激活按键音并可设置音量。

出厂设置:

通过旋转并按下旋钮 **(B)**,用户可选择“**出厂设置**”选项。选择并按下“**OK**”恢复出厂设置,所有参数将恢复为出厂时的原始数值(见“**菜单结构**”)。

蓝牙(Bluetooth):

在“**Bluetooth**”菜单中,用户可以激活/取消激活**Bluetooth**功能,对号(✓)表示该选项被激活。

信息:

在“**信息**”菜单选项中,用户可预览搅拌器系统中的重要参数。

接口和输出

本仪器可通过 RS 232 或者 USB 接口连接电脑,使用实验室软件 labworldsoft® 进行远程(Remote)控制。

RS 232 接口位于仪器背面,接口配置了 9 针 SUB-D (微型 D 类) 端口,可用来连接电脑,针脚被分配了串行信号。

仪器背面的 USB 接口用于连接电脑和无线控制器。无线控制器同时也配置了 USB 接口,该接口位于其右侧,也可以用来连接电脑用于远程控制。

注:请注意实验室软件系统所需的使用条件、使用说明以及帮助系统。

USB接口:

通用串口 (USB) 系统用于将仪器与电脑连接。支持 (USB) 的设备可以在运行过程中相互连接 (热插拔) 并且自动识别所连接的仪器及其属性。

使用 USB 接口结合实验室软件 labworldsoft® 进行远程控制并可进行固件的更新

USB驱动:

首先通过USB接口从以下路径:

<http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip>

下载并安装最新的驱动程序。然后使用USB数据线连接仪器和电脑。数据通信通过虚拟 COM 端口进行,配置、指令和虚拟 COM 端口的指令如 RS 232 接口中所述。

串行接口RS 232:

配置:

- 按照 DIN 66 020 第 1 部分,仪器和自动控制系统间接口符合 EIA 标准。
- RS 232 标准接口电子属性和信号分配符合 DIN 66 259 标准第 1 部分。
- 传输过程:非同步起止模式。
- 传输类型:全双工通信制式。
- 特征形式:特征表现符合 DIN 66 022数据格式的起止模式,1 起始位;7 数据位;1 校验位(偶位);1 终止位。
- 传输速率:9600 bit/s。
- 数据流控制:无。
- 存取程序:只有电脑发出需求指令时,仪器才会将数据传输至电脑。

指令语法和格式:

下列为适用于命令设置指令和语法:

- 指令通常从电脑 (Master) 传输至仪器 (Slave)。
- 只有电脑发出需求指令时仪器 (Slave) 才会向电脑 (Master)发出信息。即使故障信息也不会自动从仪器发送至电脑。
- 指令以大写字母的形式传输。
- 命令和参数(含连续参数)通过至少一个空格分开(代码:hex 0x20)。
- 每个独立的命令(含参数和数据)以及反馈都以空的 CR LF 终止 (代码:hex 0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0A) 并且最大长度为 80 个字符。
- 十进制分隔符表现为数字的“点”(.) (代码:hex 0x20E)。

上述指令指令以尽可能的接近 NAMUR 工作组的推荐规范 (NAMUR 推荐的用于实验室控制设备电子元器件模拟输出和信号传输的接口, rev. 1.1)。


NAMUR 指令和其他 IKA® 指令在仪器和电脑之间的信息传递过程中仅仅是低级的命令。利用合适的终端程序或信息程序可以将这些指令直接传输到仪器。IKA® 实验室软件可以方便的控制仪器并可在 Windows 界面下收集信息,包括绘制特征图,马达转速曲线等。

下列表格中列出了 IKA® 控制设备可以识别的(NAMUR)指令。

NAMUR 指令	功能
IN_NAME	读取仪器名称
IN_PV_3	读取 PT 1000 数值
IN_PV_4	读取当前转速数值
IN_PV_5	读取当前扭矩数值
IN_SP_4	读取额定转速数值
IN_SP_5	读取扭矩限制数值
IN_SP_6	读取转速限制数值
IN_SP_8	读取安全转速数值
OUT_SP_4	调整额定转速数值
OUT_SP_5	调整扭矩限制数值
OUT_SP_6	调整转速限制数值
OUT_SP_8	调整安全转速数值
START_4	启动马达
STOP_4	停止马达
RESET	切换至普通操作模式
OUT_MODE_n (n= 1 or 2)	改变运转方向
IN_MODE	读取运转方向

PC 1.1数据线(连接主机与电脑):





用于连接9针接口和电脑。

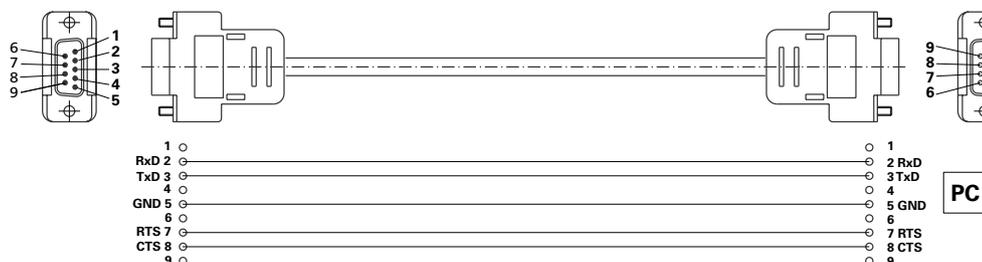

连接:无线控制器至 EUROSTAR 主机:



连接: EUROSTAR 主机至电脑:

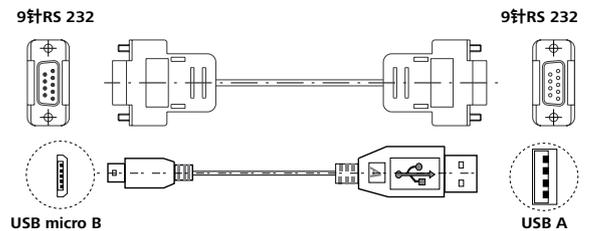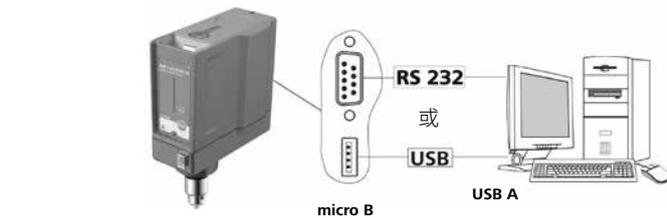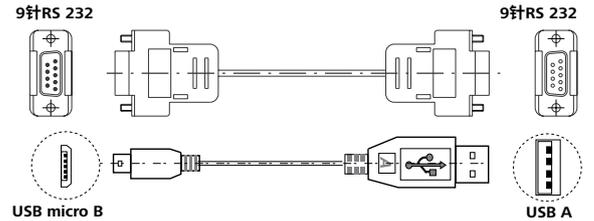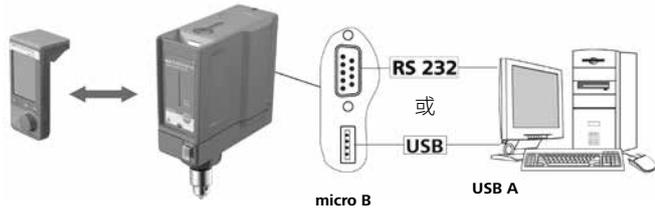

清洁维护

本仪器无需特殊保护。只会出现零部件的自然磨损及磨损后可能的偶然统计失效。

清洁:



清洁前仪器须断开电源。

清洁仪器时仅可使用IKA®公司认可的清洁剂。

污物

染料
建筑材料
化妆品
食品
燃料

清洁剂

异丙醇
含活性剂的水溶液/异丙醇
含活性剂的水溶液/异丙醇
含活性剂的水溶液
含活性剂的水溶液

列表中未列出的物质, 请联系IKA®应用支持部门。

清洁时, 请佩戴防护手套。

清洁时, 请勿将电子设备放置于清洁剂中。

清洁时, 请勿让潮气进入仪器。

使用其他非IKA®推荐的清洁剂时, 必须向IKA®公司确保该清洁方式不会对仪器造成损坏。

备件订购:

订购零部件时, 请提供:

- 机器型号
- 序列号, 见铭牌
- 备件的名称和编号, 详见www.ika.com备件图和备件清单
- 软件版本。

维修:

在送检您的仪器之前, 请先清洁并确保仪器内无任何对人健康有害的物料残留。

维修时, 请向IKA®索取或官方网站(www.ika.com)下载打印并填写“消除污染证明”。

如需维修服务, 请使用原包装箱妥善包装后将仪器寄回。如原包装不存在时请采用合适的包装。

错误代码

出现故障时, 屏幕(C)提示错误信息, 例如错误代码4。

此时, 按照以下步骤处理:

- ☞ 关闭仪器开关(A)。
- ☞ 取下搅拌桨并将仪器从整个装置上取下。
- ☞ 降低转速并重新开启仪器(无搅拌桨)。

错误	原因	影响	解决措施
Error 2	马达电流传感器故障	马达停止	- 关闭仪器
Error 3	仪器内部温度过高	马达停止	- 关闭仪器待其冷却
Error 4	马达堵转或过载	马达停止	- 关闭仪器 - 降低马达负载并重新启动
Error 8	速度传感器故障或过载	马达停止	- 关闭仪器
Error 21	安全继电器故障	马达停止	- 关闭仪器

如果上述措施无法排除故障或者出现其他错误代码请采取下列措施:

- 联系售后部门;
- 附简短故障说明, 将仪器送返维修。

保修

根据IKA®公司保修规定本机保修两年; 保修期内如果有任何问题请联络您的供货商, 您也可以将仪器附发票和故障说明直接发至我们公司, 运费由贵方承担。

保修不包括零件的自然磨损, 也不适用于由于过失、不当操作或者未按使用说明书使用和和维护引起的损坏。

选配件

R 2722 H形支架
R 2723 伸缩支架
R 270 夹头
R 271 夹头
RH 5 容器固定夹
FK 1 柔性接头
R 301 搅拌桨保护罩
R 301.1 固定支杆
R 60 手紧式钻夹头

PC 1.1 数据线
H 70 延长线
H 62.51 不锈钢温度传感器
H 66.51 不锈钢温度传感器, 玻璃覆膜
RB 1 电池
OS 1.0 电源装置
USB 数据线 (USB cable micro A – micro B 2.0)
USB 数据线 (USB cable A – micro B 2.0)
保护盖

☞ 仅适于EUROSTAR 60 control!

IKA®可选搅拌桨

	最大转速 (rpm)		最大转速 (rpm)
R 1342 螺旋桨式搅拌桨	≤ 2000	R 1300 溶解式搅拌桨	≤ 2000
R 1345 螺旋桨式搅拌桨	≤ 800	R 1302 溶解式搅拌桨	≤ 1000
R 1381 螺旋桨式搅拌桨	≤ 2000	R 1303 溶解式搅拌桨	≤ 2000
R 1382 螺旋桨式搅拌桨	≤ 2000	R 1352 离心式搅拌桨	≤ 2000
R 1389 螺旋桨式搅拌桨, PTFE 覆膜 ≤ 800		R 1355 离心式搅拌桨	≤ 800
R 1311 涡轮式搅拌桨	≤ 2000	R 1375 扇页式搅拌桨	≤ 800
R 1312 涡轮式搅拌桨	≤ 2000	R 1330 锚式搅拌桨	≤ 1000
R 1313 涡轮式搅拌桨	≤ 800	R 1331 锚式搅拌桨	≤ 1000

技术参数

		EUROSTAR 60 control	EUROSTAR 100 control
EUROSTAR 主机 + 无线控制器			
额定负载下转速范围	rpm	0 / 30 – 2000	0 / 30 – 1300
调速		无级调速	
转速显示		TFT / 无线控制器	
转速设置精度	rpm	± 1	
转速测量偏差		转速 < 300 rpm: ± 3 rpm/转速 > 300 rpm: ± 1%	
搅拌输出轴最大扭矩	Ncm	60	100
扭矩测量		有	
扭矩显示		有	
扭矩测量偏差	Ncm	± 6	
最大搅拌量 (水)	ltr	40	100
最大粘度	mPas	50000	70000
间歇工作		有	
反向转动		无	有
外部温度计接口		有	
温度显示		有	
定时功能		有	
工作制	%	100	
额定电压	VAC	230 ± 10% (EURO), 115 ± 10% (USA)	
频率	Hz	50 / 60	
最大输入功率	W	176	186
搅拌轴最大输出功率	W	126	136
保护等级 (DIN EN 60529)		IP 40	
安全等级		I	
过压类别		II	
污染水平		2	
过载保护		是 / 马达电流保护	
保险丝 (位于主板)	A	T 4 A (IKA® 订货号:2585100)	
允许周边温度	°C	+ 5 ... + 40	
允许相对湿度	%	80	
马达		无刷马达	
钻夹头夹持范围	mm	0.5 – 10	
中空轴内径	mm	11	
支臂 (Ø x L)	mm	16 x 220	
外壳		带涂层铸铝和热塑性塑料	
尺寸 (W x D x H), 无支臂, 含无线控制器	mm	86 x 230 x 267	
重量 (含支臂和钻夹头)	kg	4.7	
操作海拔	m	max. 2000	
USB 接口		有	
RS 232 接口		有	
温度显示精度	K	± 0.1	
温度测量范围	°C	- 10 ... + 350	
温度传感器偏差 (PT 1000 DIN EN 60751, A 级)	K	≤ ± (0.15 + 0.002 x ITI)	
温度测量准确度	K	± 0.5 + PT 1000 公差 (DIN EN 60751, A 级)	
最大通讯距离 (取决于建筑物状况)	m	40 – 150	
尺寸 (W x D x H) – 无线控制器	mm	71 x 74 x 151	
重量 – 无线控制器	kg	0.28	
USB 接口 – 无线控制器		有	
RB 1 电池			
电压	V	3.7	
电池容量	mAh	2000	
充电时间	h	4.5	
工作时间	h	15	
电池类型		锂聚合物电池	

技术参数若有变更, 恕不另行通知!

IKA

designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059

eMail: sales@ika.net

KOREA

IKA Korea Ltd.

Phone: +82 2 2136 6800

eMail: sales-lab@ika.kr

BRAZIL

IKA Brazil

Phone: +55 19 3772 9600

eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd

Phone: +60 3 6099-5666

eMail: sales.lab@ika.my

CHINA

IKA Works Guangzhou

Phone: +86 20 8222 6771

eMail: info@ika.cn

POLAND

IKA Poland Sp. z o.o.

Phone: +48 22 201 99 79

eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN

IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781

eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA

IKA India Private Limited

Phone: +91 80 26253 900

eMail: info@ika.in

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162

eMail: sales.english@ika.com

VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited

Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

Thailand

IKA Works (Thailand) Co. Ltd.

Phone: +66 86 375 7451

eMail: sales.lab-thailand@ika.com

Turkey

IKA Turkey A.Ş.

Phone: +90 216 394 43 43

eMail: sales.turkey@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:
www.ika.com



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide