



ColorFlex[®] EZ



测量颜色，
如您所视



应用于

咖啡

粉末

颗粒

糖

小球

液体

清洁剂

树脂

色素

薯条

层压制品

酱汁

水泥浆

填缝剂

香料

水泥

混凝土和
塑料板

酸奶

果汁

板和

塑料板

粘合剂

色素

化学品

乳制品

漆板

水果

乳酪

粉末

涂料

坚果

肥皂

固体

最接近目测的检定结果

采用 45°/0° 光学几何结构, ColorFlex® EZ 简单易用, 为您提供高水平的颜色质量控制。ColorFlex® EZ 多用途、简易及高效能, 为用户提供值得信赖的颜色测量。

以超过六十年颜色测量的经验和智慧, 将颜色测量技术整合在这个小巧的仪器中。

45°/0° 设计: 达到完美的色彩质量

ColorFlex® EZ 具备 45°/0° 几何结构, 是模拟以人眼视觉观察样品的最佳仪器, 确保在每次测量中都得到完美无误的色度。

可连接更多介面


具有 3 个 USB 2.0 接口埠, 可连接多种周边设备:

- 以 USB 闪存盘储存检测结果, 并可转移至多台仪器或电脑
- 键盘可手动输入样品名称
- 以条码扫描器快速采集样品, 避免人为数据输入错误
- 可立即打印样本数据
- 利用 EasyMatch® QC 软件, 得到颜色数据

较简易

轻松应付所有的颜色测量挑战:

- 尺寸小, 仅需很小的桌面空间
- “一键式”操作

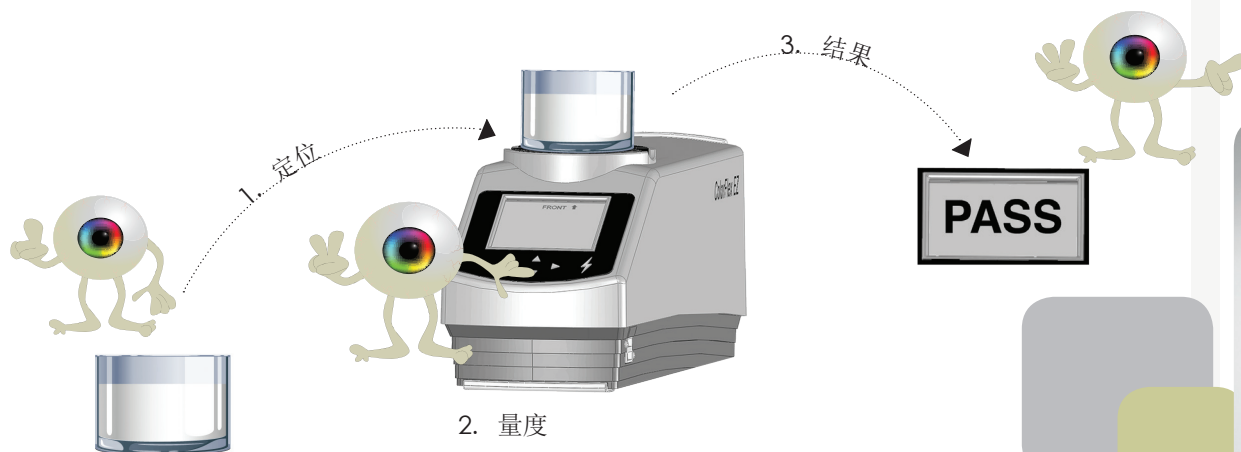

性能更卓越

功效卓越、果更佳:

可以测量多种样品，包括不透明的固体、液体、粉末、颗粒和球状以至半透明的固体和液体

- 简易数据传输，将设置和标准从一台仪器传输至另一台，上传或下载至 USB 闪存盘以便备份
- 闪存盘 **250种** 样品设置、产品标准和容差设置，及多达 **2000种** 样品测量



灵活性更强

内置软件配备 250 种设置，具有多项参数如产品标准值及容差值等，详见以下:

- 色阶、指数、光源及观测者参数，并指出数据产生的条件
- 为行业提供客观标准，以辨别色差
- 针对产品规格设定合格/不合格公差
- 取平均值，以提供不均匀或不一致样品的准确测量值
- 以多种格式报告测量数据，如颜色数据、色差数据，和光谱差异数据
- 大量样品处理工具

也可提供
ColorFlex® EZ Tomato

亨特立(HunterLab)的优势



亨特立一直专注于研发颜色测量技术，本公司拥有60年的经验和智慧，ColorFlex® EZ 就是在这基础上钻研出来。亨特立从各种仪器、软件、技术支持以及培训，为用户提供完备的解决方案。

就是如此简单!

这就是 ColorFlex® EZ



若要了解更多资讯，请浏览 www.hunterlabcolor.cn 或与我们联系。

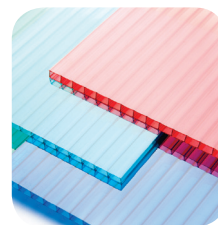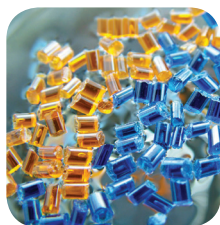

配件



04-4000-00

不透明样品杯盖

提供遮光罩，以排除外来光源对量度的干扰。

04-7209-00

玻璃取样量杯： 64 毫米 (2.5 英寸)

透明的玻璃杯以量度液体、粉末、颗粒和球状样品。

02-4579-00

圆环和圆盘套装

与量杯配合使用，以量度液体、粉末、颗粒和球状样品。



04-6622-00

样品杯测口片

64 毫米 (2.5英寸) 设计用于精准放置和固定玻璃样品杯，以量度液体、粉末、颗粒和样品。

04-6623-10

32 毫米 (1.25英寸) 测口片

04-6623-09

25 毫米 (1英寸) 测口片

04-6623-08

19 毫米 (0.75英寸) 测口片

04-6623-05

13 毫米 (0.50英寸) 测口片

轻松调整样品测量区。



A13-1014-294

USB键盘

用户使用具有 88个字母键的键盘，能够直接输入名称至仪器。

A13-1014-254

USB条码扫描器

条码扫描器扫描产品名称至仪器，并自动检测出来。

A13-1014-259

USB打印机

允许数据打印出来，需要标准USB数据线和热敏纸，两者单独出售。



L02-1014-608

硬面手提箱, ColorFlex® EZ

ColorFlex® EZ 专用硬面手提箱。

- 其它配件及夹具现正有售

内容如有更改，恕不另行通知。