

The world's true measure of color

HunterLab

ColorFlex[®] EZ Citrus



测量颜色，
如您所视



ColorFlex® EZ Citrus

和ColorFlex® EZ系列的所有产品一

样，ColorFlex® EZ Citrus专门为满足顾客对柑橘产品的测色需要而制造。

每一个ColorFlex® EZ Citrus都蕴藏HunterLab公司

—全球真正的测色公司—60年颜色质量控制 的经验和创新。

采用 45°/0°几何结构，ColorFlex® EZ Citrus简单易用，为您提供高水平的颜色质量控制。更重要的是，它可以

测量颜色， 如您所视

ColorFlex® EZ Citrus 可测量橘子果肉、新鲜和浓缩橘子汁、葡萄柚汁和柠檬汁的颜色。

配置中的柑橘色标包括：

- 柑橘指数
- 柑橘红色度
- 柑橘黄色度

其他重要色标，包括**Hunter L,a,b** 和 **CIE L*a*b***，均由部件提供，

ColorFlex® EZ Citrus 也可用于测量多种液体、半固体和固体非柑橘类样品的反射色。



与所有 ColorFlex® EZ一样，

ColorFlex® EZ Citrus

为您提供更多……

- **较简易** 一触即可启动样品测量
- **可连接更多介面** 配备 3 个 USB 2.0 接口埠
- **耐用性** 具备适于工业环境的

密封光学设计

- **多样性** 标准配备 250 项产品设置，
包括多项参数，如：

- 色标、指数、光源及观测环境
测量条件设置
- 标准值
- 合格/不合格公差
- 计算平均值 - 用于不规则样品 的重复测量



在其可选的、自定义设计的防水携带式仪器箱中， 您可以从里面的仪器立即开始测量柑橘颜色值……

- ColorFlex® EZ Citrus 仪器
- 整套仪器和诊断标准
- 校准橘子汁 4 标准
- 橘子汁试管架
- 样品夹/端口朝前支架

……均有行业内最好的客户支持。

若要了解更多资讯，请浏览 www.hunterlabcolor.cn 或与我们联系。




配件



A11-1011-510

橘子汁标准, 一组 6 个 (OJ1-OJ6)

塑料和未校准试管, 带有定位螺钉。
其用于使仪器符合 USDA 的标准

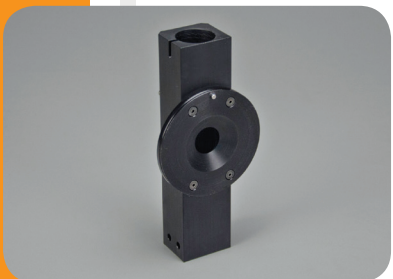

D02-1011-127

端口插件: 橘子汁试管架

橘子汁试管架直径为 25 毫米 (1 英寸)。
其用于在测量端口固定样品试管。



D02-1010-459

可调式样本固定臂

在测量时稳固地握住在样本孔的样本, 可以使样本在测量时保持平直。



A13-1014-294

USB键盘

用户使用具有88个字母键的键盘, 能够直接输入ID至
ColorFlex® EZ Citrus。

A13-1014-254

USB条码扫描器

条码扫描器扫描产品ID至仪器, 并自动检测出来。

A13-1014-259

USB打印机

允许数据打印出来, 需要标准USB数据线和热敏纸, 两者单独出售。

• 其它配件及夹具现正有售

内容如有更改, 恕不另行通知。