

搅拌砂磨分散多用机（变频调速）


说明：BGD 750系列砂磨、分散、搅拌多用机（变频调速）是目前我公司自主开发设计的新产品，该产品保持了砂磨、分散、搅拌多种的功能于一体的优点。

主要性能特点：

- ◆ 采用高品质变频鼠笼电机，用变频调速器进行调速。
- ◆ 变频器直接安装在机器上，变频器的显示屏直接显示转轴转速。
- ◆ BGD 750/1、BGD 750/2升降杆标识有刻度，方便用户调节升降高度（分散盘与料筒底部距离）。
- ◆ 无碳刷，使用过程中不会产生火花；噪音低、转速跨度，出力大、使用寿命长、调速范围广。
- ◆ 主要零部件均采用全不锈钢制造，耐腐蚀。
- ◆ 配有两个不同尺寸的分散盘、两个不同尺寸砂磨盘和一个不锈钢夹层料筒，能适应实验室不同的实验需要。
- ◆ 料筒冷却水进出口均配有快速接头，方便实验人员快速插拔冷却水管
- ◆ 1.25L料筒率先行业采用整体模具制造（国内同行均为焊接），无缝一体拉伸成型，罐底为圆弧底，可彻底清洗罐内残余物料，方便试验人员分散不同颜色的样品。
- ◆ 电源：220V 50HZ



BGD 750/1

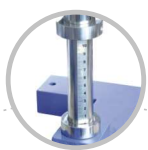

升降杆标识有刻度，
方便用户调节升降高度



BGD 750/2



BGD 751/2



BGD 752/2

支架选配



BGD 750/3



BGD 750/5

微信扫码，乐享视频



BGD 750/1-2



BGD 750/3-4



BGD 752/2-5

搅拌砂磨分散多用机（变频调速）

| 技术指标 → 订购信息 ↓ | 电机 功率 | 调速范围 (r/min) | 升降系统 | 升降行程 (mm) | 料筒 容积 | 标配分散盘 (mm) | 标配砂磨盘 (mm) | 外形尺寸, mm W×D×H (最低~最高) |
|------------------|----------|-----------------|------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------------------|
| BGD 750/1 | 550W | 0-7500 | 手动弹簧 | 240 | 1.25L | 50&60 | 50&60 | 475×430×560~800 |
| BGD 750/2 | 750W | 0-6000 | 手动弹簧 | 260 | 1.25L | 50&60 | 50&60 | 475×430×635~895 |
| BGD 751/1 | 550W | 0-7500 | 电动升降 | 300 | 1.25L | 50&60 | 50&60 | 610×430×850~880 |
| BGD 751/2 | 750W | 0-6000 | 电动升降 | 300 | 1.25L | 50&60 | 50&60 | 610×430×850~880 |
| BGD 752/2(防爆型) | 750W | 0-3000 | 手动弹簧 | 300 | 1.25L | 50&60 | 50&60 | 700×720×1300~1510 |
| BGD 750/3 | 1100W | 0-6000 | 电动升降 | 320 | 3L | 60&80 | 90&100 | 475×430×840~910 |
| BGD 750/4 | 1500W | 0-5000 | 电动升降 | 320 | 3L | 80&100 | 90&100 | 475×430×840~960 |
| BGD 750/5 | 2200W | 0-4000 | 电动升降 | 520 | 5L | 100&120 | 100&130 | 530×560×965~980 |
| BGD 752/5(防爆型) | 2200W | 0-3000 | 手动弹簧 | 520 | 5L | 100&120 | 100&130 | 640×680×1430~1500 |

其它可选附件:

BGD 1410---35mm分散盘

BGD 1411/S---50mm 高效分散盘 (低黏物料用)

BGD 1411/H---50mm 重型分散盘 (高黏物料用)

BGD 1412/S---60mm 高效分散盘 (低黏物料用)

BGD 1412/H---60mm 重型分散盘 (高黏物料用)

BGD 1413---80mm分散盘

BGD 1414---100mm分散盘

BGD 1415---120mm分散盘

BGD 1416---150mm分散盘

BGD 1417---200mm分散盘

BGD 1420---50mm砂磨盘

BGD 1421---60mm 砂磨盘

BGD 1422---90mm砂磨盘

BGD 1423---100mm 砂磨盘

BGD 1424---130mm砂磨盘

BGD 1450---0.3L 不锈钢分散罐

BGD 1451---0.5L 不锈钢夹层分散罐

BGD 1452---1.25L 不锈钢夹层分散罐

BGD 1453---3L 不锈钢夹层分散罐

BGD 1454---5L 不锈钢夹层分散罐

BGD 1455---10L 不锈钢夹层分散罐

BGD 1456---20L 不锈钢夹层分散罐

BGD 1460---防爆电箱支架



高效分散盘
适用于低黏度样品



重型分散盘
适用于高黏度样品



砂磨盘

采用进口塑料原材料, 耐磨性能好、抗冲击性能好, 在研磨表现更优异的效果。



分散罐

1.25L料筒采用整体模具制造, 无缝一体拉伸成型, 罐底为圆弧底, 可彻底清洗罐内残余物料, 方便分散不同颜色的样品。

标格达分散罐尺寸

| 订购信息 | BGD 1450 | BGD 1451 | BGD 1452 | BGD 1453 | BGD 1454 | BGD 1455 | BGD 1456 |
|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 容积 | 0.3L (单层) | 0.5L | 1.25L | 3L | 5L | 10L | 20L |
| 内径 | 73 mm | 85 mm | 103 mm | 129 mm | 164 mm | 214 mm | 268 mm |
| 内深 | 71 mm | 95 mm | 165 mm | 236 mm | 253 mm | 282 mm | 355 mm |
| 焊接底 | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 圆弧底 | | | √ | | | | |
| 提手 | | | | √ | √ | √ | √ |